

beurer

FC 40



CZ	Čistič pórů	
	Návod k použití	2
SK	Čistič pórov	
	Návod na obsluhu	15



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.



VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Příklad není vhodný pro osoby mladší než 18 let.
- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, jemné terapie, krevního tlaku / diagnostiky, hmotnosti, masáže a vzduchu.

S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah

1. Obsah balení	3
2. Vysvětlení symbolů.....	4
3. K seznámení.....	5
4. Použití v souladu s určením	5
5. Varovná a bezpečnostní upozornění.....	5
6. Popis přístroje	7
6.1 Přístroj	7
6.2 Nástavce	8
7. Uvedení do provozu	8
8. Použití.....	9
8.1 Provedení testu pleti	9
8.2 Nabíjení baterie	10
8.3 Před použitím respektujte	10
8.4 Oblasti použití	11
9. Čištění a údržba	12
10. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	12
11. Likvidace	12
12. Technické údaje	13
13. Záruka/servis	13

1. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 x FC 40
- 1 x kulatý nástavec (velký)
- 1 x kulatý nástavec (malý)
- 1 x oválný nástavec
- 10 x náhradní filtr
- 2 x těsnicí kroužek
- 1 x kryt filtru
- 1 x nabíjecí kabel USB
- 1 x tento návod k použití



2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	NEBEZPEČÍ Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Čtete pokyny
	Stejnoseměrný proud Laite sopii ainoastaan käyttöön tasavirralla
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)
	Výrobce
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.

 	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Tuotteet ovat todistettavasti yhdenmukaisia Euraasian talousunionin teknisten standardien kanssa.

3. K seznámení

Čistič pórů FC 40 umožňuje hluboké čištění pleti díky nejmodernější vakuové technologii. Pomocí kulatých nástavců můžete účinně odstranit pupínky, uhry a odumřelé buňky kůže. Čistič pórů nabízí dále oválný nástavec, s nímž můžete dosáhnout lepší pružnosti a prokrvení pokožky na obličeji.

Čistič pórů má přehledný LCD displej, na němž se zobrazuje stav nabití baterie a stupeň intenzity. S 5 stupni intenzity umožňuje čistič individuální čištění a péči podle vašich potřeb.

4. Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výlučně na lidský obličej (kromě očních partií a rtů) dospělých osob. Přístroj nepoužívejte na zvířatech!

Přístroj je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné! Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním. Nepoužívejte přístroj, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných a bezpečnostních upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře.

5. Varovná a bezpečnostní upozornění



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.



VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**:

- na popraskané kůži,
- na otevřených ranách,
- na očních partiích nebo na ústech,
- na těle vyjma obličeje (kromě očních partií a úst),
- během těhotenství,
- jestliže jste podstoupili kosmetickou operaci obličeje,
- jestliže trpíte srdeční chorobou,
- jestliže trpíte kožními chorobami (např. opary, cévním onemocněním nebo zbytněním pokožky),
- jestliže trpíte rakovinou kůže,
- jestliže trpíte podrážděním pokožky,
- přímo po slunění nebo spálení kůže sluncem,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy,
- jestliže užíváte léky na ředění krve,
- jestliže trpíte některou z následujících nemocí: roztroušenou sklerózou, cukrovkou nebo autoimunitním onemocněním.



POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození přístroj nechte opravit v kvalifikované opravně.



VAROVÁNÍ


- Zajistěte, aby síťový kabel a síťový adaptér nepřišly do styku s vodou, párou nebo dalšími tekutinami.
- Používejte přístroj jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ne ve vaně, v sauně).
- Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
- Používejte přístroj pouze suchýma rukama.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním zcela nabijte baterii.
- Pro dosažení co nejdelší životnosti baterie ji plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

6. Popis přístroje

6.1 Přístroj

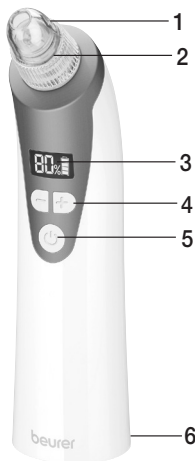

1. Nástavec

2. Sací hlavice s krytem filtru

3. Zobrazení intenzity a stavu nabití baterie

4. Tlačítko -/+

pro nastavení stupně intenzity
(20 %, 40 %, 60 %, 80 % nebo 99 %)

5. Vypínač

6. Přípojka micro USB


pro nabíjení baterie nabíjecím kabelem
micro USB

6.2 Nástavce


	Kulatý nástavec (velký) Vhodný pro čištění pórů na velké ploše. Můžete ho používat všude na obličeji kromě pokožky kolem očí.
	Kulatý nástavec (malý) Vhodný pro čištění pórů v obtížně přístupných místech (např. na nose). Můžete ho používat všude na obličeji včetně citlivé pokožky kolem očí.
	Oválný nástavec Podporuje pružnost a prokrvení pokožky obličeje. Vhodný zejména pro použití na chřípí nosu a kolem očí a úst. Doporučujeme používat oválný nástavec se stupněm intenzity 1.

7. Uvedení do provozu


1. Otáčivým pohybem vytáhněte nástavec z přístroje a sejměte kryt na sací hlavici.

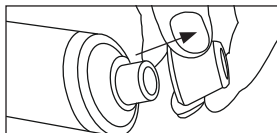


2. Na sací hlavici nasadte filtr a opět zavřete kryt. Dávejte přitom pozor na to, aby filtr zůstal suchý.

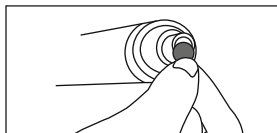


3. Na sací hlavici nasadte požadovaný nástavec.

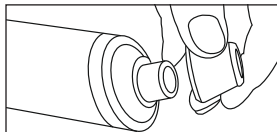

4. Nyní zapněte přístroj stisknutím vypínače. Na displeji se rozsvítí zobrazení intenzity a stavu nabití baterie.

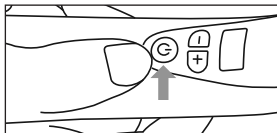

5. Tlačítka -/+ zvolte požadovaný stupeň intenzity. Doporučujeme začínat s nižším stupněm intenzity, abyste si na přístroj postupně zvykli.

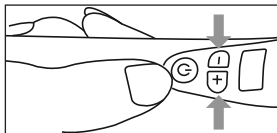


6. Přejíždějte přístrojem po pokožce obličeje. Dávejte pozor na to, abyste přístrojem nepřejížděli obličejové partie více než jednou. Bližší podrobnosti o ošetřování se dozvíte v kapitole „6.5 Oblasti použití“.


Upozornění

Tlak přístroje při ošetřování by měl být příjemný, neměl by být bolestivý. Po ošetření by mělo být patrné mírné zčervenání.

7. Ošetření ukončíte stisknutím vypínače. Zobrazení intenzity a stavu nabití baterie zhasne.

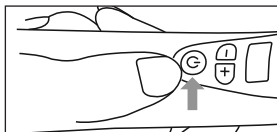

8. Po každém ošetření vyměňte filtr. Otáčivým pohybem vytáhněte nástavec směrem nahoru a sejměte kryt pod ním. Vyměňte filtr pomocí pinzety.

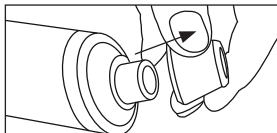

8. Použití

8.1 Provedení testu pleti

Provedte 24 hodin před použitím test pleti s tímto přístrojem. Za tím účelem otestujte přístroj na nejnižší stupeň intenzity na malých, nenápadných místech na krku. Pokud by testované místo bylo po 24 hodinách zarudlé nebo bolavé, přístroj nepoužívejte.

POZOR

Nepoužívejte přístroj delší dobu na jednom místě, abyste si nezpůsobili krevní výrony.

8.2 Nabíjení baterie

Než začnete používat přístroj, musíte ho alespoň 5 hodin nabíjet. Postupujte takto:

- Připojte nabíjecí USB kabel k vhodnému síťovému adaptéru (výstup: 5 V; 0,5 A) a k přístroji. Síťový adaptér pak zapojte do vhodné zásuvky. Alternativně můžete přístroj nabíjet pomocí nabíjecího kabele a USB přípojky na počítači/notebooku.

Během nabíjení se na displeji zobrazuje aktuální stav nabití baterie. Jakmile je přístroj plně nabitý, zobrazí se na displeji . Úplné nabití baterie vystačí přibližně na 90 minut provozu (na nejvyšší stupeň intenzity). Jakmile na displeji začne blikat zobrazení stavu nabití baterie , musíte přístroj opět nabít.

8.3 Před použitím respektujte

Upozornění

Než začnete přístroj používat, ujistěte se, že pleť obličeje je čistá, suchá a bez jakýchkoliv zbytků pudru, krému nebo make-upu.

VAROVÁNÍ

- Přístroj nepoužívejte častěji než jednou za týden.
- Bezprostředně po ošetření se může na pokožce obličeje objevit mírné zarudnutí. Tento jev není neobvyklý, zarudnutí zmizí samo nejpozději do 30 minut.
- Den před ošetřením a následující den se vyhýbejte činnostem, které vyvolávají pocení, sauně, soláriu nebo slunci.
- Po použití: Očistěte obličej vodou a chraňte ho před sluncem.

Upozornění

U méně citlivé problematické pleti je možné přístroj používat i 2x týdně (s přestávkou mezi ošetřeními nejméně 48 hodin).

8.4 Oblasti použití

Upozornění

Dbejte na to, aby ošetřovaná oblast obličeje byla při přejíždění pokožky přístrojem napjatá. Toho docílíte tím, že budete volnou rukou pokožku napínat dolů nebo do strany.

Nepoužívejte přístroj delší dobu na jednom místě.


Čelo:

Přejíždějte přístrojem pomalu a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Dejte pozor na to, abyste žádnou část pokožky nepřejížděli víckrát.



Spánky:

Přejíždějte přístrojem směrem ven k vlasové linii. Postup opakujte na levé i pravé straně obličeje. Dbejte na to, aby přístroj byl vždy ve vzdálenosti nejméně 1 cm od očí.

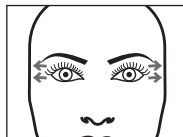

Nos:

Přejíždějte přístrojem od horní části nosního hřbetu středem dolů. Postup opakujte na levé i pravé straně nosu.




Tváře:

Přejíždějte přístrojem směrem ven podél tváří.



Kolem úst:

Přejíždějte přístrojem nad horním rtem směrem od středu doleva a doprava. Přejíždějte přístrojem od dolního rtu doleva a doprava směrem nahoru. Dejte pozor na to, abyste se přímo nedotýkali rtů!

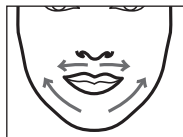

9. Čištění a údržba

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin!
- Po každém použití dezinfikujte nástavce běžným dezinfekčním prostředkem.
- Po každém ošetření vyměňte filtr.
- Pokud je přístroj znečištěný, očistěte ho suchou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

10. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu adres).

Uveďte příslušné objednací číslo.

Náhradní díl	Číslo položky nebo objednací číslo
10 náhradních filtrů	164083
2 těsnicí kroužky	164084
Kulatý nástavec (velký)	164080
Kulatý nástavec (malý)	164081
Oválný nástavec	164082
Nabíjecí kabel USB	164079
Kryt filtru	164085

11. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.



12. Technické údaje

Napájení	5 V --- 0,5 A
Rozměry	cca 172 x 46 x 42 mm
Baterie:	
Kapacita	900 mAh
Jmenovité napětí	3,7 V
Označení typu	Li-Ion
Hmotnost	~150 g

13. Záruka/servis

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.

Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí. Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz příložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit

- kopii faktury / doklad o nákupu
- originální výrobek

společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na

- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);
- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodłużují záruční lhůtu.



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uscho-
vajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným
používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.



VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkrom-
nom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj nie je vhodný pre osoby do 18 rokov!
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými teles-
nými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a vedomostí v tom
prípade, ak bude na ne dohliadať iná osoba, alebo ak
od nej dostali pokyny týkajúce sa bezpečného použi-
vania prístroja a porozumeli nebezpečenstvám vyplý-
vajúcich z používania tohto prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie
tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho
nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo
vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená
bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní poky-
nov zaniká záruka.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže a vzduchu. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a dodržiavajte upozornenia.

S priateľským odporúčaním, Váš tím Beurer

Obsah

1. Obsah balenia	16
2. Vysvetlenie symbolov	17
3. Účel použitia	18
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	19
5. Popis prístroja	21
5.1 Zariadenie	21
5.2 Nadstavce	21
6. Uvedenie do prevádzky	22
7. Použitie	23
7.1 Vykonanie testu na pokožke	23
7.2 Nabitie akumulátora	23
7.3 Na čo musíte dbať pred použitím	24
7.4 Oblasti použitia	24
8. Čistenie a starostlivosť	25
9. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu	25
10. Likvidácia	26
11. Technické údaje	26
12. Záruka/Servis	26

1. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 x FC 40
- 1 x okrúhly nadstavec (veľký)
- 1 x okrúhly nadstavec (malý)
- 1 x oválny nadstavec
- 10 x náhradný filter
- 2 x tesniace krúžky
- 1 x kryt filtra
- 1 x USB nabíjací kábel
- 1 x tento návod na obsluhu



2. Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

	NEBEZPEČENSTVO Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
	Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyn
	Jednosmerný prúd Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Výrobca
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.

 	Obal ekologicky zlikvidujte.
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.

Oboznámenie sa

Čistič pórov FC 40 umožňuje hĺbkové čistenie pórov vďaka najmodernejšej vákuovej technológii. Pomocou okrúhlych nastavcov je možné efektívne odstrániť vyrážky, čierne bodky a prebytočné šupiny. Čistič pórov má tiež oválny nastavtec, ktorý sa môže použiť na zlepšenie elasticity a krvného obehu pokožky tváre.

Čistič pórov má priehľadný LCD displej na indikáciu úrovne nabitia akumulátora a stupňa intenzity. S celkovo 5 stupňami intenzity umožňuje čistič pórov individuálne čistenie a starostlivosť podľa vašich potrieb.

3. Účel použitia

Prístroj používajte výlučne na ľudskú tvár dospelých osôb (okrem pohyblivých častí očí a pier). Prístroj nepoužívajte na zvieratá!

Prístroj je určený len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Prístroj používajte výlučne na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné! Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia. Prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných a bezpečnostných upozornení. Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so svojím lekárom.

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA

- Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom! Obal uchováajte mimo dosahu detí!
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

VÝSTRAHA

Prístroj **NEPOUŽÍVAJTE**,

- na popraskanej pokožke
- na otvorených ranách
- okolo očí alebo na ústach
- na tele okrem tváre (okrem okolia očí a úst)
- počas tehotenstva
- ak ste absolvovali plastickú operáciu tváre
- ak trpíte ochorením srdca
- ak trpíte kožným ochorením (napr. herpes, cievne ochorenia alebo kožné výrastky)
- ak trpíte rakovinou kože
- ak trpíte podráždením kože
- priamo po opaľovaní alebo pri úpale
- ak užívate lieky obsahujúce steroidy
- ak užívate lieky na riedenie krvi
- ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: skleróza multiplex, diabetes alebo autoimunitným ochorením.

POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

VÝSTRAHA


- Uistite sa, že USB nabíjací kábel a sieťový zdroj neprichádzajú do styku s vodou, parou alebo inými kvapalinami.
- Prístroj používajte len v suchých miestnostiach (napr. nikdy nie vo vani, saune a pod.).
- Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.
- Prístroj používajte len so suchými rukami.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

- Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti môžu akumulátory prehltnúť a zadušiť sa nimi. Z toho dôvodu skladujte akumulátory mimo dosahu malých detí!
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým uvedením do prevádzky nabite akumulátor doplna.
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora nabite akumulátor doplna aspoň 2-krát do roka.

5. Popis prístroja

5.1 Zariadenie

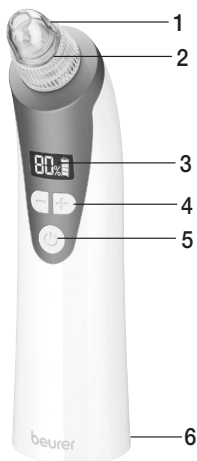

1. Nadstavec

2. Sacia hlava s krytom filtra

3. Indikátor intenzity a stavu akumulátora

4. -/+ tlačidlo

Pre nastavenie stupňa intenzity
(20 %, 40 %, 60 %, 80 % alebo 99 %)

5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

6. Micro-USB konektor


Na nabíjanie akumulátora s micro-USB
nabíjacím káblom

5.2 Nadstavce


	Okrúhly nadstavec (veľký) Vhodný na čistenie veľkých plôch pórov. Môže sa používať kdekkoľvek na tvári, s výnimkou pokožky okolo očí.
	Okrúhly nadstavec (malý) Vhodný na čistenie pórov na ťažko dostupných miestach (napríklad na nose). Môže sa používať kdekkoľvek na tvári, aj na citlivej pokožke okolo očí.
	Oválny nadstavec Zvyšuje elasticitu kože a krvný obeh pokožky tváre. Obzvlášť vhodný na použitie na krídlach nosa a okolo očí a úst. Odporúčame používať oválny nadstavec so stupňom intenzity 1.

6. Uvedenie do prevádzky


1. Otáčavým pohybom odoberte nadstavec z prístroja a odstráňte kryt sacej hlavy.

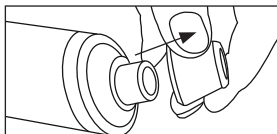


2. Nasadíte filter na saciu hlavu a uzavrite ho krytom. Dbajte na to, aby filter zostal suchý.

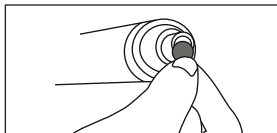


3. Umiestnite požadovaný nadstavec na saciu hlavu.

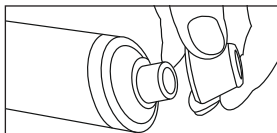

4. Pre zapnutie prístroja jedenkrát stlačte tlačidlo ZAP/VYP. Indikátor stupňa intenzity a stavu nabitia akumulátora sa rozsvieti.

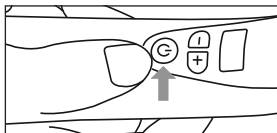

5. Pomocou tlačidiel +/- zvolte požadovaný stupeň intenzity. Odporúčame začať s nízkym stupňom intenzity počas prvých aplikácií, aby ste si pomaly zvykli na prístroj.

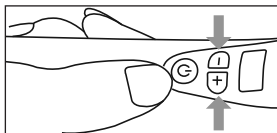


6. Prechádzajte nadstavcom po pokožke tváre. Dbajte na to, aby ste s nadstavcom neprešli po danom mieste pokožky tváre viac ako raz. Bližšie informácie o ošetroení nájdete v kapitole „6.5. Oblasti použitia“.


Upozornenie

**TLAK PRI POUŽÍVANÍ BY MAL BYŤ PRÍJEMNÝ A NEMAL BY SPÔSOBOVAŤ BOLEST'.
PO POUŽITÍ BY MALO BYŤ VIDNO MIERNE SČERVENENIE.**

7. Pre ukončenie ošetrovania stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Indikátor stupňa intenzity a stavu nabitia akumulátora zhasne.

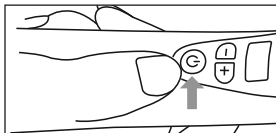

8. Po každom použití vymeňte jednorazový filter. Na tento účel potiahnite nadstavec otočným pohybom smerom nahor a vyberte kryt pod ním. Odstráňte filter pomocou pinzety.

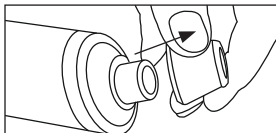

7. Použitie

7.1 Vykonalenie testu na pokožke

24 hodín pred použitím otestujte prístroj na pokožke. Otestujte pritom prístroj s najnižšou úrovňou intenzity na malých, nenápadných miestach na krku. Ak otestované miesto po 24 hodinách sčervená, alebo ak začne bolieť, nepoužívajte prístroj.



POZOR

Prístroj nikdy nepoužívajte dlhší čas na rovnakom mieste, aby ste predišli tvorbe modrín.

7.2 Nabitie akumulátora

Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky ho nechajte minimálne 5 hodín nabíjať. Postupujte nasledovne:

- Pripojte nabíjací kábel USB k vhodnému sieťovému adaptéru (výstup: 5V; 0,5A) a prístroju. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Alternatívne môžete prístroj nabíjať s USB nabíjacím káblom aj prostredníctvom USB portu na vašom počítači/laptope.

Počas nabíjania zobrazuje indikátor stavu nabitia akumulátora na displeji aktuálnu úroveň nabitia akumulátora. Hneď ako je prístroj plne nabitý, na displeji sa zobrazí . Plné nabitie batérie trvá približne 90 minút (na najvyššom stupni intenzity). Ak na displeji bliká indikátor stavu nabitia akumulátora , musíte prístroj opäť nabiť.

7.3 Na čo musíte dbať pred použitím

Upozornenie

Pred začatím používania dbajte na to, aby bola pokožka tváre čistá, suchá a bez akýchkoľvek zvyškov, ako napríklad zvyškov púdry, krémov alebo mejkapu.

VÝSTRAHA

- Nepoužívajte prístroj častejšie ako jedenkrát týždenne.
- Priamo po ošetroaní sa na ošetrenej pokožke tváre môže objaviť mierne sčervenanie. Je to normálne a sčervenanie zmizne najneskôr po 30 minútach.
- Deň pred a deň po použití nevykonávajte činnosti, pri ktorých by ste sa mohli potiť a vyhýbajte sa saune, soláriu a slnku.
- Po použití: Očistite si tvár vodou a chráňte ju pred slnkom.

Upozornenie

Pri necitlivej problémovej pokožke môžete prístroj používať 2-krát týždenne (prestávka medzi použitiami musí byť minimálne 48 hodín).

7.4 Oblasti použitia


Upozornenie

Dbajte na to, aby bola ošetrovaná oblasť tváre pri prechádzaní prístrojom po pokožke napnutá. To dosiahnete tak, že voľnou rukou potiahnete pokožku nadol alebo do boku a tým ju napnete.

Prístroj nikdy nepoužívajte dlhší čas na rovnakom mieste.


Čelo:

Pohybujte prístrojom pomaly a rovnomerne od stredu čela smerom do strán. Dbajte na to, aby nedošlo k ošetrovaniu pokožky viac ako raz.

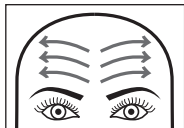

Spánky:

Pohybujte prístrojom smerom k vlasovej čiare. Zopakujte postup na ľavej a pravej strane nosa. Dbajte na to, aby bol prístroj vzdialený od očí aspoň 1 cm.

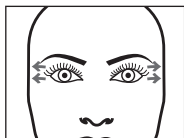

Nos:


Pohybujte prístrojom od horného chrbta nosa smerom nadol. Zopakujte postup na ľavej a pravej strane nosa.

**Líca:**

Pohybujte prístrojom smerom von pozdĺž líc.

**Okolo úst:**

Pohybujte prístrojom po hornej pere od stredu smerom doľava a doprava. Pohybujte prístrojom od spodnej pery zľava a sprava smerom nahor. Dbajte na to, aby ste priamo nedotýkali pier!

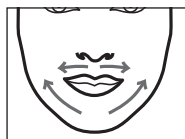

8. Čistenie a starostlivosť

- V žiadnom prípade prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
- Po každom použití dezinfikujte nástavce použitím bežného dezinfekčného prostriedku.
- Po každom použití vymeňte filter.
- Vyčistite prístroj pri znečistení pomocou suchej handričky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

9. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu je možné zakúpiť na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu adries servisov).

Zadajte príslušné objednávacie číslo.

Náhradný diel	Výrobné alebo objednávacie číslo
10 náhradných filtrov	164083

2 tesniace krúžky	164084
Okrúhly nadstavec (veľký)	164080
Okrúhly nadstavec (malý)	164081
Oválny nadstavec	164082
USB nabíjací kábel	164079
Kryt filtra	164085

10. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



11. Technické údaje

Napájanie	5 V === 0,5 A
Rozmery	cca 172 x 46 x 42 semm
<u>Akumulátor:</u> Kapacita Menovité napätie Typové označenie	900 mAh 3,7 V Li-Ion
Hmotnosť	~150 g

12. Záruka/Servis

Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté. Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia. Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné.

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť

- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
- originálny výrobok spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené

- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebojú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);
- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;
- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom,

resp. servisom a zákazníkom;

- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.

