


## návod k použití Masážní přístroj na chodidla MGF-836

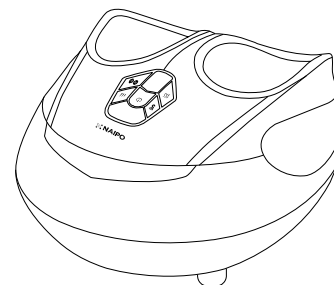

### Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro masážní přístroj na nohy se zahříváním a masáží vzduchovými polštáři firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

### Balení obsahuje

- 1 x masážní přístroj nohou
- 1 x návod k použití
- 1 x síťový adaptér

### Technické údaje

Název: Masážní přístroj se zahříváním a masáží vzduchovými polštáři Naipo

Model: MGF-836

Napájení: 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz

Spotřeba: 36 W

Výchozí časovač: 15 minut

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí, ani v prostředí s vysokou teplotou; hrozí jeho poškození.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokou koncentrací benzínu, ředidel, alkoholu či žíravin, jako jsou bělidla, aby nedošlo ke změně barevnosti výrobku, k jeho deformaci, popraskání a závadě.
- Nesedějte na přístroj a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Přístroj by neměli používat děti, těhotné ženy, starší lidé a lidé s příznaky osteoporózy.
- Přístroj používejte výhradně s dodávaným adaptérem.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (například v koupelně), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem či k jiným bezpečnostním problémům.
- Přístroj přestaňte používat, jakmile pocítíte neobvyklou nebo palčivou bolest; pak se neprodleně obraťte na odbornou opravnu.
- Bude-li poškozený kryt výrobku či napájecí kabel, přístroj nepoužívejte.
- Doporučujeme přístroj nepoužívat nepřetržitě déle než 15 minut. Nadměrné používání přístroje může způsobit bolest svalů či nervů.
- Před použitím přístroje nebo během jeho používání neaplikujte léčivé/kosmetické krémy či emulze na tělo přístroje nebo na chodidla.
- Nepoužívejte přístroj, má-li poškozená nožní pouzdra nebo napájecí kabel.
- Pokud se do přístroje dostane voda, nepoužívejte jej.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!