


návod k použití

Masážní přístroj s vyhříváním pro komplexní masáž nohou

typ: MGF-839A

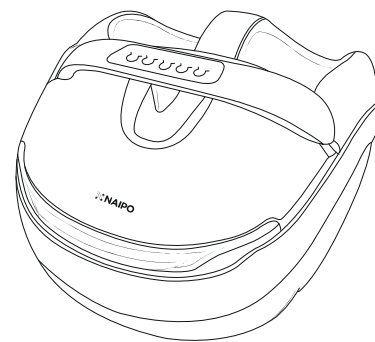

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro masážní přístroj s vyhříváním pro válečkovou masáž nohou firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

Balení obsahuje

- 1 x masážní přístroj nohou
- 1 x návod k použití
- 1 x síťový adaptér

Technické údaje

Název: masážní přístroj s vyhříváním pro komplexní masáž nohou

Model: MGF-839A

Napájení: 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz

Spotřeba energie: 65 W


Časovač: 15 minut

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vyhněte se přímému kontaktu pokožky s přístrojem.
- Přístroj je vybaven vyhřívacím zařízením, proto dbejte opatrnosti, pokud je jeho uživatel citlivý na teplo.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokou koncentrací benzínu, ředidel, alkoholu či žravin, jako jsou bělidla, aby nedošlo ke změně barevnosti výrobku, k jeho deformaci, popraskání a závadě.
- Nesedějte na přístroj a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Uvedené osoby by přístroj používat neměly: těhotné ženy; lidé trpící srdečními chorobami či jinými zdravotními potížemi.
- Doporučujeme přístroj nepoužívat nepřetržitě déle než 15 minut. Nadměrné používání přístroje může způsobit bolest svalů či nervů.
- Děti by neměly přístroj používat bez dozoru dospělé osoby.
- Před použitím přístroje nebo během jeho používání neaplikujte léčivé/kosmetické krémy či emulze na tělo přístroje nebo na chodidla.
- Nepoužívejte přístroj, má-li poškozená nožní pouzdra nebo napájecí kabel.
- Pokud se do přístroje dostane voda, nepoužívejte jej.
- Přestaňte přístroj používat, pokud pocítíte bolest či diskomfort.

Schéma přístroje

1. Zdrhovadlo
2. Ovládací panel
3. Spodní skořepina
4. Odnímatelná pouzdra na nohy (po rozeptnutí můžete pouzdra oddělit / suchým zipem a zdrhovadlem je můžete připevnit)
5. Horní skořepina

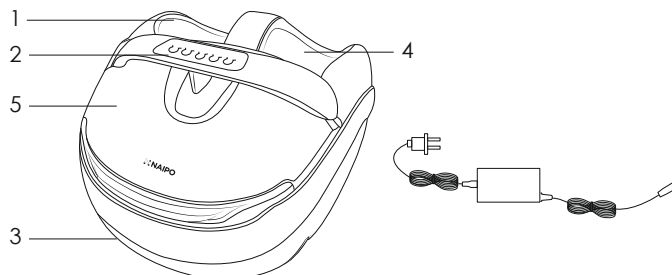

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!