


LANAFORM®

Foot Massager

Massager

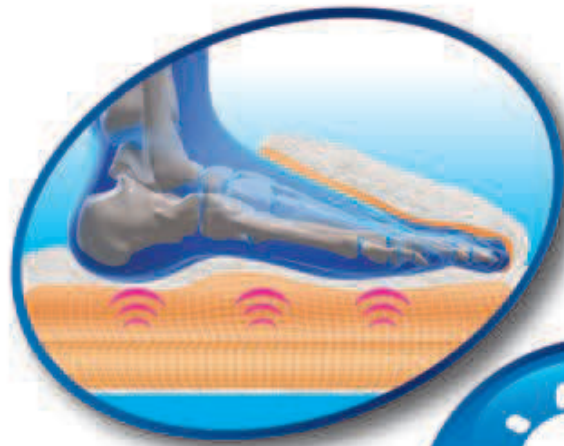

Eases feet

Soulage les pieds

Verlicht de voeten

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme vám za zakoupení zařízení FOOT MASSAGER od společnosti LANAFORM®. Zařízení FOOT MASSAGER poskytne odpočinek vašim nohám pomocí jemných vibrací.

JEŠTĚ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVÉHO NOVÉHO ZAŘÍZENÍ „FOOT MASSAGER“ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY, ZEJMÉNA PAK TĚCHTO NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH RAD:

- Příklad použijte výhradně pro účely uvedené v tomto návodu k použití a dle pokynů v něm.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nebo osobám bez zkušeností či znalostí, pokud výše uvedené osoby nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo ještě nebyly poučeny o používání zařízení. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Používejte výhradně doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky doporučené společností LANAFORM.
- Zařízení zásadně nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místnosti, kde je nakládáno s kyslíkem.
- V žádném případě nezakrývejte ventilační otvory, a stejně tak zařízení nikdy nepokládejte na nestabilní plochy, jako např. koberec, matrace. Mohlo by dojít k narušení ventilace. Zkontrolujte, zda nejsou otvory ventilace zanesené vlasy, chlupy, plstnatými smotky, prachem apod. Do otvorů nezasunujte žádné předměty.
- Nepoužívejte toto zařízení před spaním. Masáž má stimulační účinky, které mohou potřebovat spánek.
- Toto masážní zařízení zásadně nepoužívejte během spánku.
- Zařízení Foot Massager neumísťte do blízkosti radiátorů či jiných zdrojů tepla.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte pro masírování části těla, která je oteklá, zanícená či zasažená kožní vyrážkou.
- Nedopustte, aby na zařízení upadl jakýkoliv předmět, a stejně tak aby žádné předměty (připínáčky či jiné kovové předměty) nebyly do něj vkládány či zapichovány.
- Jestliže zařízení Foot Massager nefunguje, nechejte ho zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele či v záručním servisu.
- Nepoužívejte toto zařízení pod pokrývkou či polštářem. Nahromaděné teplo by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Tento výrobek je masážní přístroj pro neprofesionální využití a je určený pro zmírnění svalové únavy. Tento přístroj nepoužívejte jako náhradu lékařské péče. Přístroj je určený výhradně pro domácí použití.

SOUČÁSTKY

1. Příhrádka na baterie



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!