

LANAFORM®

# Back Massager

Massager cushion



Vibrating and  
Heating

Vibrant et  
Chauffant

Trillend en  
verwarmend

# BACK MASSAGER

## ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali masážní zařízení „BACK MASSAGER“ od společnosti LANAFORM®, které v sobě spojuje kvalitu a jednoduchost. Zařízení „BACK MASSAGER“ je masážní podložka na křeslo, která je vybavena pěti motory. Tyto motory vytvářejí vibrace, které vám umožní snížit napětí, svalovou bolest a zklidnit svalovou únavu. Velmi pohodlné a snadno použitelné zařízení „BACK MASSAGER“ vám nabízí příjemnou vibrační masáž. Toto zařízení je vybaveno funkcí, díky níž si můžete vybrat cílovou oblast pro danou masáž, a rovněž tak je vybaveno automatickou funkcí, která vám nabízí harmonický cyklus složený z různých typů masáží. Přístroj je možno snadno ovládat pomocí přehledného dálkového ovladače, který se díky svému ergonomickému tvaru dokonale přizpůsobí každé ruce. Zařízení „BACK MASSAGER“ lze používat v kanceláři i doma.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ „BACK MASSAGER“ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NIŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Toto zařízení použijte pouze k účelům, pro něž je určeno, viz návod k použití.
- Než zařízení použijete, je nutné odstranit sáček se silicí proti vlhkosti.
- Tento výrobek není určen pro osoby (většinou děti) s omezenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nebo osobám bez zkušeností či znalostí, pokud výše uvedené osoby nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo ještě nebyly poučeny o používání zařízení. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Použijte výhradně doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky doporučované společností LANAFORM®.
- V případě poškození napájecího kabelu jednotky je nutno ho nahradit stejným nebo podobným kabelem, který můžete zakoupit u dodavatele nebo v servisní provozovně.
- Zařízení nesmí být použito v případě, je-li je poškozen napájecí kabel, zařízení nefunguje správně, upadlo na zem nebo je poškozeno či spadlo do vody. Nechte proto váš přístroj zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele či v záručním servisu.
- Přístroj zásadně nepřenášejte zavěšený za přívodní kabel a přívodní kabel nepoužívejte jako držadlo.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Zařízení, které spadlo do vody, okamžitě odpojte ze sítě, a to ještě před jeho vylovením z vody.
- Zapojená elektrická zařízení nesmí nikdy zůstat bez dozoru. Jestliže zařízení nepoužíváte, odpojte ho.
- Napájecí kabel nesmí být umístěn v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte toto zařízení před spaním. Masáž má stimulační účinky, které mohou ovlivnit pocit únavy.
- Toto masážní zařízení zásadně nepoužívejte během spánku.
- Nedopusťte, aby na zařízení upadl jakýkoliv předmět, a stejně tak aby žádné předměty (připínáčky či jiné kovové předměty) nebyly do něj vkládány či zapichovány.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místnosti, kde se podává nebo skladuje kyslík.
- Nepoužívejte toto zařízení pod pokrývkou či polštářem. Nahromaděné teplo by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Před odpojením přístroje z elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je tlačítko „ON/OFF“ v poloze „OFF“ (Vypnuto).
- Máte-li zdravotní problémy, obraťte se před použitím tohoto přístroje na svého ošetřujícího lékaře.
- Jestliže během používání zařízení ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě používání přerušete a obraťte se na svého lékaře.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte pro masírování části těla, která je oteklá, zanícená či zasažená kožní vyrážkou.
- Tento výrobek je masážním zařízením pro neprofesionální využití, který je sestaven tak, aby zmírňoval svalovou únavu. Tento přístroj nepoužívejte jako náhradu lékařské péče. Přístroj je určený výhradně pro domácí použití.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### 1. Technická specifikace


- Vibrační masáž
- 5 motorů
- 4 režimy vibračních masáží doplněné o jeden automatický režim
- 4 intenzity masáže
- 4 masážní zóny (horní část zad / spodní část zad / hýždě a stehna)
- 1 „zahřívací“ funkce
- Časovač (15, 30 nebo 60 min.)

### 2. Popis zařízení „BACK MASSAGER“

#### System upínacích popruhů:

Součástí vybavy masážního přístroje „BACK MASSAGER“ je systém upínacích popruhů, díky nimž jej lze snadno uchytit na jakémkoliv křesle. Upínací popruhy natáhněte na obě strany opěráku, spojte je a upevněte pomocí zakončení na suchý zip.

#### Ovládací prvky ovladače:

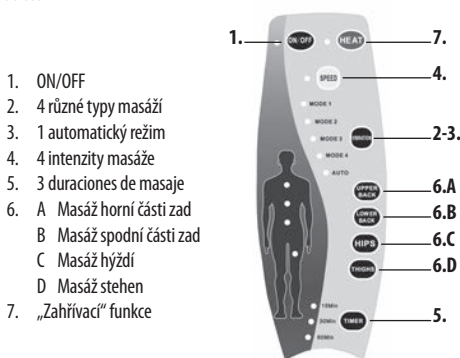

1. ON/OFF
2. 4 různé typy masáží
3. 1 automatický režim
4. 4 intenzity masáže
5. 3 duraciones de masaje
6. A Masáž horní části zad  
B Masáž spodní části zad  
C Masáž hýždí  
D Masáž stehen
7. „Zahřívací“ funkce

### 3. Použití zařízení „BACK MASSAGER“

#### ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)

„BACK MASSAGER“ se používá v kombinaci s adaptérem. Nejprve zapojte koncovku napájecího kabelu do zásuvného konektoru (samice) na pravé straně masážní podušky. Potom adaptér zapojte do elektrické zásuvky. Po zapojení do zásuvky elektrického napájení je přístroj „BACK MASSAGER“ připravený k použití.

Zapínání a vypínání přístroje je ovládáno stisknutím tlačítka ON/OFF (viz schéma, bod 1).

#### Režim manuálního ovládání

V tomto režimu si můžete vybrat:

Jeden ze čtyř nabízených typů masáže: Režim 1, 2, 3, 4 (viz schéma, bod 2).

Jednu ze čtyř nabízených intenzit (viz schéma, bod 4).

Délku trvání masáže (15, 30 nebo 60 min.) (viz schéma, bod 5).

Oblast masáže podle vaší chuti a/nebo potřeb (viz schéma, body 6a, 6b, 6c, 6d).

„Zahřívací“ funkce, která přispívá k uvolnění svalového napětí (viz schéma, bod 7).

**Důležité upozornění:** Jestliže máte na sobě svetr, sako nebo jiný podobný oděv, může se stát, že nebudete teplo cítit.

#### Automatický režim (viz schéma, bod 3)

Tento režim je složen z jednotlivých typů masáží. Tato funkce je zajímavá v případě, že požadujete různé typy masáže. Funkce „TIMER“, „SPEED“, „HEAT“ a požadovaná oblast masáže mohou být rovněž využívány v automatickém režimu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!