

**LAICA**NON-CONTACT
INFRARED FOREHEAD
THERMOMETER

HC84/1-11/2018

LAICA[®]**LAICA S.p.A.**Viale del Lavoro, 10
36021 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Phone +39 0444.795314 - 795321
Fax +39 0444.795324
Made in China**www.laica.com****LAICA**[®]


Οδηγίες και εγγύηση

HTD8813**ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ**

σελίδα 4

RO	<u>Instrucțiuni și garanție</u>	pagina 22
	TERMOMETRU DE FRUNTE CU INFRAROȘII ȘI LA DISTANȚĂ	
CS	<u>Návod k použití a záruční podmínky</u>	strana 38
	INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR NA ČELO S MĚŘENÍM NA DÁLKU	
SK	<u>Návod na použitie a záruka</u>	strana 54
	INFRAČERVENÝ ČELOVÝ TEPLOMER A NA BEZKONTAKTNÉ MERANIE	
HU	<u>Utasítások és garancia</u>	oldal 70
	INFRAVÖRÖS HOMLOK- ÉS NO CONTACT LÁZMÉR	

Fig. 1

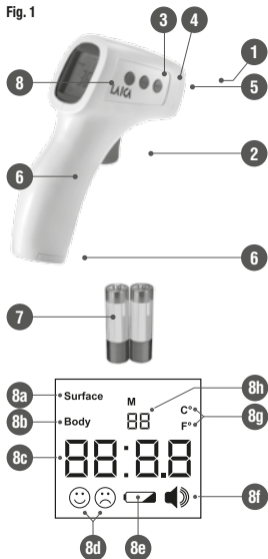

COMPONENTS

- 1) Measurement probe
- 2) "On" key
- 3) "SET" key
- 4) "MEMO" key
- 5) "MODE" key
- 6) Battery compartment
- 7) Batteries
- 8) LCD Display
 - a. Indication of ambient and liquid temperature measurement
 - b. Indication of forehead temperature measurement
 - c. Temperature recorded
 - d. Indication of the measurement result
 - e. Low battery indicator
 - f. Sound signal active
 - g. Unit of measure
 - h. Memory number



XPONIA ΕΓΓΥΗΣΗ
ANI DE GARANȚIE
ROK ZÁRUKA
ROK ZÁRUKA
ÉV GARANCIA

LAICA S.p.A.
Viale del Lavoro, 10
36021 Barbarano Mossano (VI)
Italy
Phone +39 0444.795314 - 795321
Fax +39 0444.795324
Made in China

www.laica.com

Data - Date



Σφραγίδα καταστήματος
Ștampilă distribuitor
Razítko prodejece
Pečiatka predajcu
Bolti pecsét

**ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΥΠΕ HTD8813 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Αγαπητέ Πελάτη, η Laica επιθυμεί να σας ευχαριστήσει για την προτίμηση που δείξατε αγοράζοντας το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την αξιοπιστία και την ποιότητα με σκοπό να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε άλλο κάτοχο παραδώστε και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Για μια ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες και προειδοποιήσεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, οδηγίες χρήσης και συντήρησης. Σε περίπτωση απώλειας του εγχειρίδιου οδηγιών ή ανάγκης για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την εταιρεία στην παρακάτω διεύθυνση: Laica S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – 36021 Barbarano Mossano (VI) – Italy. +39 0444.795314 - 795321 - Φαξ: +39 0444.795324 - www.laica.com

Το θερμόμετρο υπερύθρων μετώπου LAICA ανιχνεύει τη θερμότητα που εκπέμπεται από το μέτωπο προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασία του σώματος του ασθενούς. Ο πρωτοποριακός τρόπος μέτρησης από απόσταση το καθιστά ιδανικό για μετρήσεις σε παιδιά, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του σώματος, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και εκείνης των υγρών. Με ευρεία οθόνη LCD και οπίσθιο φωτισμό σε τρία διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τη θερμοκρασία μέτρησης. **Σημείωση: η θερμοκρασία που αναγράφεται στην οθόνη αντιστοιχεί στη θερμοκρασία της μασχάλης.**

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Προειδοποίηση



Απαγόρευση

CE 0598

Συμμόρφωση με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων



Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης

EC REP

Εκπρόσωπος της ΕΕ



Σύμβολο «εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF»

LOT

Αριθμός παρτίδας παραγωγής



Κατασκευαστής



Αριθμός σειράς

IP22: Βαθμός προστασίας των περιβλημάτων των ηλεκτρικών συσκευών, όπου το πρώτο ψηφίο δείχνει το βαθμό προστασίας από την εισχώρηση ξένων στερεών σωμάτων (από 0 έως 6) και το δεύτερο ψηφίο το βαθμό προστασίας από την εισχώρηση υγρών (από 0 έως 8).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη χωρίς εμφανείς βλάβες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης.
- Η πλαστική συσκευασία πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά: κίνδυνος ασφυξίας.
- Το παρόν προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και με τον τρόπο που υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από την ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.
- Η χρήση και η συντήρηση αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνει και από άτομα με μειωμένες κινητικές και αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία μόνο υπό την κατάλληλη επίτηρηση ενός ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα από παιδιά ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των 11 ετών (ικανά να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις οδηγίες χρήσης).
- Φροντίζετε τη συσκευή, προστατέψτε την από προσκρούσεις, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σκόνη, απευθείας ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Σε περίπτωση βλάβης και/ή κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή χωρίς να την αλλοιώσετε. Για επιδιορθώσεις απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν πιάνετε της συσκευής. ΜΗ βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό ή σε άλλα υγρά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

- 1) Η αυτομέτρηση σημαίνει έλεγχος και όχι διάγνωση ή θεραπεία. Οι ασυνήθιστες τιμές θα πρέπει να αναφερθούν στον γιατρό σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αλλάζουν οι δοσολογίες οποιουδήποτε φαρμάκου που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!