


MASÁŽNÍ STROJEK

TB-1613A

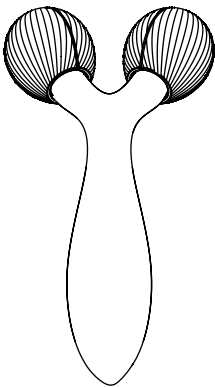

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

⚠️ VAROVÁNÍ:

- Toto zařízení by neměly používat:
 - Těhotné nebo kojící ženy
 - Osoby s alergiemi
 - Osoby s povrchovými poraněními, popraskanou kůží, boulemi, jinými závažnými kožními stavy nebo s kožními nemocemi v oblasti použití.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo vypadá být poškozeno.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

⚠️ POZOR:

- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

- Název: Masážní strojek
- Modelové číslo: TB-1613A
- Podnikový standard: Q/MMU1019-2016


POPIS ZAŘÍZENÍ

- Masážní strojek
- Rukojeť
- Skladovací taška
- Čistící hadřík

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

※ Příkladujte masážní strojek na kůži pod různými úhly k zvýšení účinnosti masáže. Může být použit na obličej a tělo jak je doporučeno níže:

- Masáž obličeje:** Jemně posouvejte válečky od čelisti k vaší lícní kosti.
Poté pomalu posouvejte válečky směrem od koutků úst k uchu.
- Masáž krku:** Jemně posouvejte válečky od ramene ke krku a čelisti.
- Masáž paží:** Opatrně posouvejte válečky podél paže.
- Masáž hrudníku:** Opatrně posouvejte válečky z podpaží do středu hrudníku.
- Masáž pasu:** Masírujte pas jemným pohybem válečků nahoru a dolů.
- Masáž nohou:** Jemně posouvejte válečky od kotníků ke stehnům.

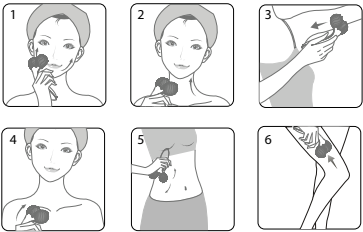

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Neponořujte toto zařízení do vody. Zařízení čistěte suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným ve vodě.
- K čištění zařízení nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky ani korozivní kapaliny.
- Na tento výrobek nikdy nepoužívejte mazaiva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.

SERVIS

1. Ekologické tipy

Nevyhazujte tento produkt do běžného komunálního odpadu, místo toho jej odevzdejte v sběrném bodě.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Masážní válečky se neotáčí plynu	V mezele mezi válečky se hromadí nečistoty	Vyčistěte mezeru mezi válečky
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

3. Záruka a servis

Pokud potřebujete servis, informace nebo máte-li jakékoli pochybnosti, navštivte webové stránky TOUCHBeauty na adrese www.touchbeauty.cz nebo kontaktujte prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Žáruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Žáruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

VÝROBCE

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City,
1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCE

elem6 s.r.o.
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká Republika
Vyrobeno v Číně.



MASÁŽNÍ STROJEK

TB-1613A

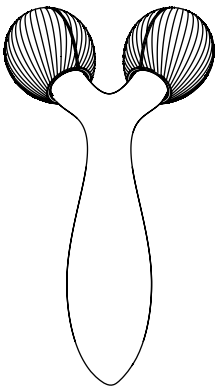

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

⚠️ VAROVÁNÍ:

- Toto zařízení by neměly používat:
 - Těhotné nebo kojící ženy
 - Osoby s alergiemi
 - Osoby s povrchovými poraněními, popraskanou kůží, boulemi, jinými závažnými kožními stavy nebo s kožními nemocemi v oblasti použití.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo vypadá být poškozeno.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

⚠️ POZOR:

- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

- Název: Masážní strojek
- Modelové číslo: TB-1613A
- Podnikový standard: Q/MMU1019-2016


POPIS ZAŘÍZENÍ

- Masážní strojek
- Rukojeť
- Skladovací taška
- Čistící hadřík

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

※ Příkladujte masážní strojek na kůži pod různými úhly k zvýšení účinnosti masáže. Může být použit na obličej a tělo jak je doporučeno níže:

- Masáž obličeje:** Jemně posouvejte válečky od čelisti k vaší lícní kosti.
Poté pomalu posouvejte válečky směrem od koutků úst k uchu.
- Masáž krku:** Jemně posouvejte válečky od ramene ke krku a čelisti.
- Masáž paží:** Opatrně posouvejte válečky podél paže.
- Masáž hrudníku:** Opatrně posouvejte válečky z podpaží do středu hrudníku.
- Masáž pasu:** Masírujte pas jemným pohybem válečků nahoru a dolů.
- Masáž nohou:** Jemně posouvejte válečky od kotníků ke stehnům.

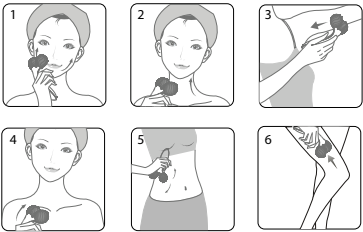

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Neponořujte toto zařízení do vody. Zařízení čistěte suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným ve vodě.
- K čištění zařízení nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky ani korozivní kapaliny.
- Na tento výrobek nikdy nepoužívejte mazaiva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.

SERVIS

1. Ekologické tipy

Nevyhazujte tento produkt do běžného komunálního odpadu, místo toho jej odevzdejte v sběrném bodě.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Masážní válečky se neotáčí plynu	V mezele mezi válečky se hromadí nečistoty	Vyčistěte mezeru mezi válečky
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

3. Záruka a servis

Pokud potřebujete servis, informace nebo máte-li jakékoli pochybnosti, navštivte webové stránky TOUCHBeauty na adrese www.touchbeauty.cz nebo kontaktujte prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Žáruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Žáruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

VÝROBCE

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City,
1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE

elem6 s.r.o.
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká Republika
Vyrobeno v Číně.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!