


Stolní ústní sprcha

Návod k použití

WT5000

Dr. Mayer
LIFE & HEALTH

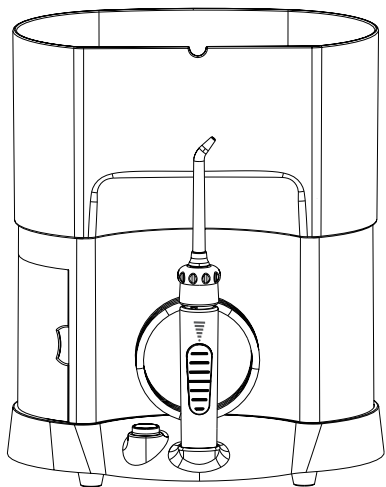

NEPŘEHLÉDNĚTE

Než začnete výrobek používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek správně a také, nezranit sebe ani jiné osoby.

Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady, zejména v přítomnosti dětí.

PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Zařízení nesmí používat malé děti. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Dojde-li k poškození šňůry nebo zástrčky, zařízení nepoužívejte.
- Po použití zařízení odpojte z elektrické sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Zařízení se nesmí dostat do vody ani do jiné tekutiny.
- Zařízení nepokládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umyvadla či vany.
- Přístroj nepoužívejte ve vaně.
- Spadne-li zařízení do vody, nesahejte na něj. Okamžitě jej odpojte z elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ

- Děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zařízení používat pouze pod dohledem.
- Se zařízením si nesmí hrát děti.
- Zařízení se smí používat pouze s napájecím dodaným v jeho příslušenství.
- Chraňte zařízení před horkými předměty.
- Používejte výhradně nástavce doporučené výrobcem.
- Zařízení nepoužívejte bez trysky.
- Chraňte trysku před malými dětmi. Tryska je malá, dítě jí může spolknout a hrozí uvíznutí v krku.
- Proudem vody nemiňte na jazyk, do uší, nosu ani na jiná citlivá místa.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno.
- Do zásobníku nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
- Některé ústní vody mohou poškodit zařízení, a zejména zásobník. Do náplně zásobníku nepoužívejte ústní vodu.
- Zařízení nemusí vyhovovat osobám se zvýšenou citlivostí zubů či dásní, a v takových případech je třeba jeho užívání konzultovat s lékařem.
- Trysku přístroje nepřikládejte příliš blízko k zubům a dásním, mohlo by dojít k poškození dásní.
- Zařízení je určeno k použití v interiéru.
- Zásobník plňte pouze čistou vodou.

TENTO NÁVOD SI DOBRĚ ULOŽTE


SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

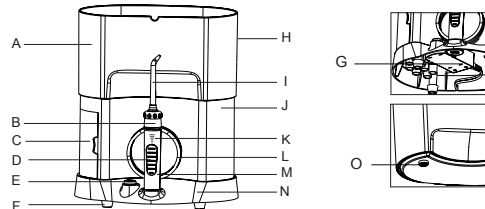

A: Zásobník na vodu
B: Spojka trysky
C: Dvířka
D: Regulátor tlaku
E: Funkční vypínač
F: Gumová nožka
G: Kryt přípojky

H: Značka plnění
I: Tryska
J: Skříň přístroje
K: Symbol regulace tlaku
L: Hadička
M: Aplikátor
N: Podstavec
O: Ventil zásobníku

Příslušenství

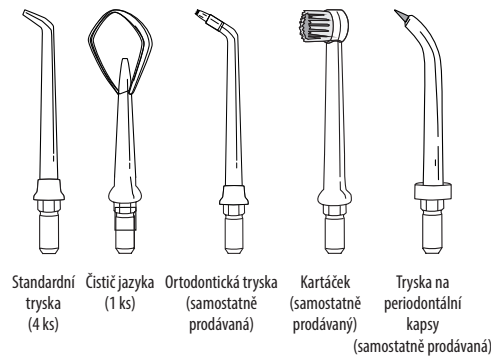

ZPŮSOB POUŽITÍ

ZAČÍNÁME

Postavte zařízení na rovnou podložku bez ostrých předmětů a zkontrolujte, zda je jeho šňůra suchá a nepoškozená. K napájení přístroje slouží síťový napáječ (vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz, výstup 12 V ss, 1,5 A).

1. Zapojte konektor napáječe do přípojky na spodku podstavce. Síťovou zástrčku napáječe zapojte do sítě podle obr. 1.
2. Zapněte zařízení, zkontrolujte správné zapojení a napájení a poté zařízení vypněte (obr. 2).
3. Vysaďte zásobník vody a nainstalujte do správného místa ventil. Přitlačte nádobu (obr. 3).
4. Napiňte zásobník vodou o teplotu do 40 °C, bez jakékoliv soli, zubní pasty či jiných chemických prostředků, nasadte a zatlačte zásobník do hlavní jednotky (obr. 3).
5. Zatlačte dolů kroužek spojky a na střed spojky do rukojeti aplikátoru nasadte trysku. Pro ověření pevného zamknutí zkuste trysku vytáhnout (obr. 4).
6. Před použitím zavřete proudění vody přesunem regulátoru tlaku do polohy (+) podle obr. 5.

Poznámka:

Při prvním použití můžete v některých částech přístroje (v zásobníku, hadičce aj.) zjistit nepatrné zbytky vody. Jde o destilovanou vodu, která se používá ke kontrole funkčnosti výrobku a není zdraví škodlivá.

Zařízení nezapínejte, dokud není tryska v ústech.

1. Uchopte aplikátor za rukojeť, namířte trysku do umyvadla a stiskem funkčního vypínače aplikátor zapněte. Fungování indikuje modré světlo kolem tlačítka (obr. 6).
2. Posuvem regulátoru na rukojeti aplikátoru nastavte tlak vody a vypněte zařízení (obr. 7).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!