

# beurer

## HK 44














**CZ** Vyhřívaná poduška  
Návod k použití

CE

## Obsah

1. Obsah balení .....	3	4.4 Nastavení teploty .....	5
1.1 Popis zařízení .....	3	4.5 Funkce automatického vypnutí .....	5
2. Důležité pokyny		4.6 Vypnutí .....	5
Uschovejte pro pozdější použití .....	3	5. Čištění a údržba .....	6
3. Použití v souladu s určením .....	4	6. Uložení .....	6
4. Obsluha .....	4	7. Likvidace .....	7
4.1 Bezpečnost .....	4	8. Co dělat v případě problémů? .....	7
4.2 Uvedení do provozu .....	5	9. Technické údaje .....	7
4.3 Zapnutí .....	5		

## Vysvětlení symbolu


	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Nebělit
	Nezapichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte příkrývku složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky
	Nevhodné pro děti do tří let.		Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.
	<b>VAROVÁNÍ;</b> Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	<b>POZOR;</b> Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		
	<b>UPOZORNĚNÍ;</b> Upozornění na důležité informace.		

## 1. Obsah balení

- 1 Vyhřevná poduška
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

### 1.1 Popis zařízení

- 1. Síťová zástrčka
- 2. Síťový kabel
- 3. Vypínač
- 4. Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
- 5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
- 6. Zástrčka

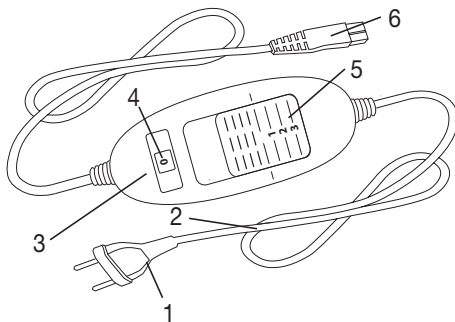

## 2. Důležité pokyny

### Ušchovejte pro pozdější použití



### VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmějí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, kteří neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat děti (3–8 roky), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřívanou podložkou bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřevné podušky a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s vyhřevnou podušku nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato vyhřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
- Do podušky nepichujte žádné špendlíky!
- Nepoužívejte podušku, jestliže je složená.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!