





## Vzhled

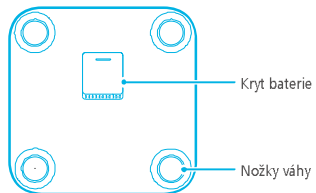


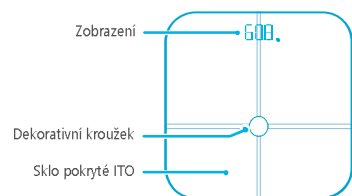


## Vložte baterie pro spuštění váhy

Otevřete kryt baterie na spodní straně váhy. Vložte 4 baterie typu AAA a kryt baterie zavřete. Váha se automaticky zapne a na displeji se objeví . Umístěte váhu na podlahu a zobrazí se :


1

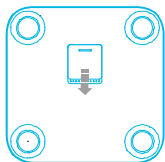

2

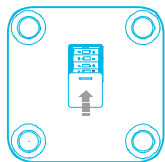

3

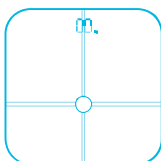

Pokud jsou slabé baterie, na displeji se zobrazí . Baterie co nejdříve vyměňte.



## Stáhněte a nainstalujte aplikaci

Vyhledejte a stáhněte si aplikaci **Váha s měřením tělesného tuku HUAWEI** v obchodě Google Play nebo Apple App Store.



## Spárujte telefon s váhou

1. Aktivujte váhu

Zlehka stoupněte na váhu jednou nohou. Displej se rozsvítí, což znamená, že váha je aktivována.

2. Otevřete aplikaci **Huawei Body Fat Scale** a po vyzvání povolte v telefonu Bluetooth.

3. Klepněte na **přidružené zařízení** a podle pokynů na obrazovce s ním spárujte váš telefon.



## Zadejte osobní údaje

Po spárování telefonu s váhou otevřete aplikaci **Huawei Body Fat Scale**. Zobrazí se dialogové okno **Přidat člena**. Zadejte základní informace, jako je pohlaví, datum narození, výška a profilová fotografie. Poté klepněte na **Hotovo**.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!