

beurer

HK 70



CS HK 70 Opěrka zad s vyhříváním
Návod k použití 2

SK HK 70 opierka chrbta s vyhrievaním
Návod na použitie 11







CE

Obsah

1. Vysvětlení symbolů.....	2	5.4 Nastavení teploty.....	7
2. Obsah balení.....	3	5.5 Automatické vypnutí.....	7
2.1 Popis přístroje.....	3	5.6 Vypnutí.....	7
3. Důležité pokyny		6. Čištění a údržba.....	8
Uchovejte pro pozdější použití.....	3	7. Uložení.....	9
4. Použití v souladu s určením.....	5	8. Likvidace.....	9
5. Ovládání.....	5	9. Co dělat v případě problémů?.....	9
5.1 Bezpečnost.....	5	10. Technické údaje.....	9
5.2 Uvedení do provozu.....	5	11. Záruka/servis.....	9
5.3 Zapnutí.....	7		

1. Vysvětlení symbolů

	Čtěte pokyny!		Extra jemné praní na 30 °C
			Nebělit
	Nevpichujte žádné špendlíky!		Nesušit v sušičce
			Nežehlit
	Nepoužívejte podložku, jestliže je přehnutá nebo složená!		Nečistit chemicky
			Neprat
	Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).	 <p>OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Hohenstein 06.0.43510 HOHENSTEIN HTTI Testováno na obsah škodlivých látek. www.oeko-tex.com/standard100</p>	Textilie použité u tohoto přístroje splňují přísné požadavky na zdravotní nezávadnost podle normy Oeko-Tex Standard 100, což bylo prokázáno výzkumným ústavem Hohenstein.
	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.		
	Stejnoseměrný proud		Výrobce
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.		


	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Certifikační značka pro výrobky, které jsou vyváženy do Ruské federace a do Společenství nezávislých států.
	VAROVÁNÍ; varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR; bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství
	UPOZORNĚNÍ; upozornění na důležité informace

2. Obsah balení

- 1x opěrka zad s vyhříváním
- 1x síťový adaptér
- 1x adaptér do auta

2.1 Popis přístroje

1. Vyhřevná poduška
2. Síťový adaptér
3. Adaptér do auta
4. Upínací pásy pro připevnění k opěradlu židle
5. Zástrčková spojka
6. Vypínač s LED kontrolkou
7. Upínací pásy pro připevnění k sedadlu auta

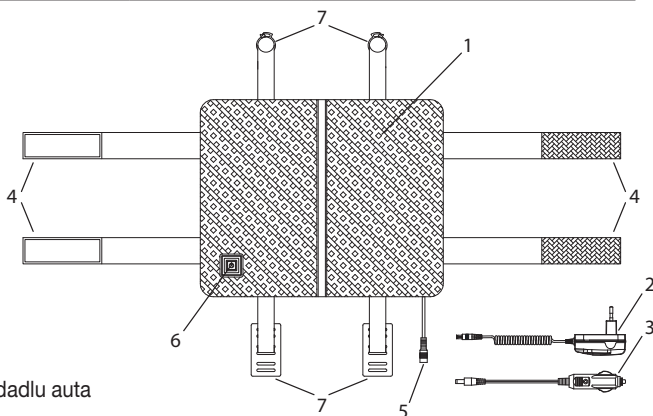

3. Důležité pokyny

Uchovejte pro pozdější použití

VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věčné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a přiložte tento návod v případě předání výrobku dále.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!