

concept

Osobní váha
Osobná váha
Waga osobista
Személmérleg
Ќермеґа сvari
Personal scale

Personenwaage
Pèse-personne
Bilancia personale
Balanza personal
Cântar persoane



VO3000

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Baterie	2x 1,5 V AAA
Rozsah vážení	2 - 180 kg
Krok vážení	100 g
Jednotka	kg, lb, st
Paměť	10 uživatelů
Uživatelský režim	dospělý, dítě (10 - 85 let)
Měřené tělesné parametry	hmotnost, tělesný tuk, tělesná voda, svalová hmota, kostní hmota, BMI, BMR
Rozsah měření	tělesný tuk: 0-46,4 % tělesná voda: 37,8-66 % svalová hmota: 20-56 % kostní hmota: 2-20 %

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Dodržujte vyznačenou polaritu baterií při jejich vkládání a výměně.
- V případě, že spotřebič nebudete delší dobu používat, vyjměte z něho baterie.
- Nedovolte dětem a nespěprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Používejte spotřebič pouze na vodorovném stabilním podkladu.
- Před čištěním, montáží a demontáží krytů spotřebič vypněte a vyjměte baterie!

- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Pokud se na displeji zobrazují chybně segmenty nebo číslice, zkuste provést tzv. reset spotřebiče. Vyjměte baterie, vyčkejte několik sekund a znovu baterie vložte. Pokud tento postup nepomůže, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Nevkládejte spotřebič do mikrovlnné ani do jiné pečicí trouby.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič je křehký měřicí přístroj. Předcházejte nárazům a pádům.
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis.
- Naměřené údaje touto váhou jsou pouze informativního charakteru. Nepředstavují lékařskou radu.
- Nepoužívejte tento spotřebič, pokud máte kardiostimulátor, EKG nebo jiný vnitřní lékařský přístroj.
- Nepoužívejte v těhotenství.
- Nepoužívejte na kluzké podlaze nebo pokud máte mokrá chodidla.
- Přesnost údajů se může lišit, pokud se vážíte po fyzické zátěži.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.



Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

POPIS VÝROBKU

- 1 Vážicí plocha
- 2 Displej

Ovládání

- 3 Tlačítko nastavení
- 4 Posun nahoru
- 5 Posun dolů

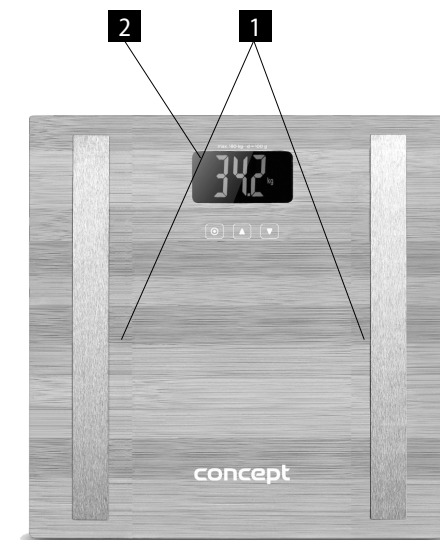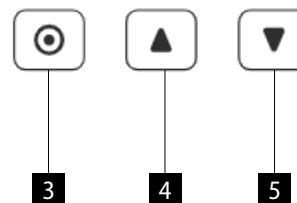

NÁVOD K OBSLUZE

INSTALACE BATERIÍ

- Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně spotřebiče.
- Vložte do prostoru pro baterie 2 ks baterií AAA (mikrotužkové) a řádně jej uzavřete krytem.

VÝBĚR JEDNOTKY HMOTNOSTI

- Zapněte váhu nášlapem a vyberte jednotku hmotnosti (kg, lb, st) pomocí šipek nahoru nebo dolů.

NASTAVENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Číslo uživatele

Zmáčkněte tlačítko nastavení a pomocí šipek vyberte číslo uživatele (možnosti P0-P9), svou volbu potvrďte zmáčknutím tlačítka nastavení a tím zároveň přejdete k dalšímu kroku.

Pohlaví

Na displeji bliká ikona muže/ženy, pomocí šipek vyberte požadované pohlaví a volbu potvrďte tlačítkem nastavení.

Věk (Age)

Na displeji bliká věk, pomocí šipek vyberte váš věk v rozmezí 10 - 85 let, volbu potvrďte tlačítkem nastavení.

Výška (cm)

Na displeji bliká výška, pomocí šipek nastavte vaši výšku v rozmezí 100 - 240 cm, volbu potvrďte tlačítkem nastavení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!