


Naipo

Instruction Manual

FOOT MASSAGER

Unique heels massage available

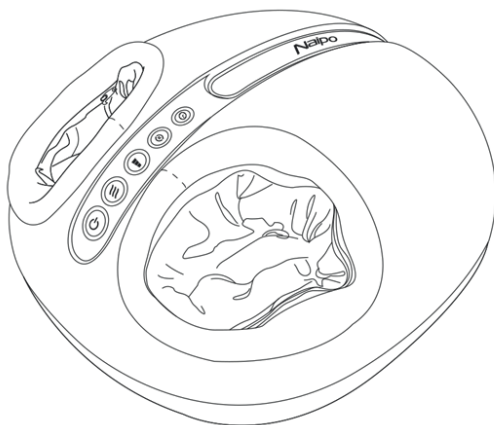

Model:MGF-F15

Popis výrobku a jeho vlastností

Vlastnosti výrobku

1. Masážní přístroj je navržen v módním tvaru brouka a díky odlehčené konstrukci se snadno přenáší.
2. Propracovaný design i technologie umožňují si dopřát profesionální masáže v pohodlí domova.
3. Dvojitá ochrana zajišťuje větší bezpečí.
4. Snadné ovládání pomocí pěti mechanických tlačítek (vypínač, volba programu, nastavení intenzity, vyhívání, nastavení času).
5. Masážní přístroj v sobě kombinuje inovativní technologie s tradiční akupresurní masáží chodidel.
6. Díky odnímatelnému krytu zůstane přístroj čistý.

Důležitá bezpečnostní varování

- Dbejte na to, aby do mezery mezi masážní hlavou a krytem přístroje nevnikly žádné cizí látky či nečistoty.
- Zabraňte styku přístroje s vodou, předejdete tak možnému poškození či úrazu v důsledku zkratu.
- Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nepokoušejte se je rozebrat a opravit sami. Kontaktujte vašeho prodejce.
- Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá doporučenému napětí.
- Po použití nebo před čištěním výrobek odpojte od elektrické sítě, abyste předešli jeho poškození nebo poranění.
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití.
- Nepoužívejte jiné příslušenství ani náhradní díly, než jsou doporučené výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jste požíli alkohol anebo se necítíte dobře.
- Výrobek nepoužívejte méně než jednu hodinu po jídle.
- Výrobek nepoužívejte bezprostředně poté, co došlo k výrazné změně okolní teploty.
- Výrobek nepoužívejte v prostředí, v němž se vyskytuje velké množství prachu nebo žíravých plynů.
- Výrobek nepoužívejte, jestliže je zakrytý přehozem, polštářem apod.
- Dbejte na to, abyste při používání výrobku neusnuli.

Výrobek by neměly používat níže uvedené osoby

- Osoby trpící infekčním kožním onemocněním.
- Osoby trpící osteoporózou.
- Osoby trpící kardiovaskulárním onemocněním a osoby s implantovanými elektrickými přístroji, jako např. kardiostimulátorem.
- Osoby s horečkou.
- Těhotné nebo menstrující ženy.
- Osoby s povrchovým poraněním nebo osoby trpící onemocněním kůže či podkoží.
- Povrch přístroje se zahřívá. Osoby citlivé na teplo by proto měly dbát zvýšené opatrnosti při jeho používání.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jste mokří.
- Výrobek nepoužívejte u zvířat.

Pokyny k obsluze a poznámky:

Masážní přístroj je určen k použití 1-2 denně po dobu 5-10 minut. Masáž ulevuje od bolesti svalů a zlepšuje krevní oběh, 5-15 minutová masáž před spaním může pomoci při nespavosti a zlepšit kvalitu spánku.

- Dbejte na to, abyste při používání výrobku neusnuli.
- Výrobek nepoužívejte k masáži déle než 30 minut.
- Výrobek nepoužívejte méně než 1 hodinu před jídlem či po něm.
- Pokud byl výrobek skladován v chladu a přenesen do teplého prostředí, může se v něm nahromadit vlhkost, která může bránit jeho normálnímu fungování a může zapříčinit i jeho poruchu. Po přemístění výrobku do prostředí s obvyklou pokojovou teplotou jej doporučujeme použít až po jedné hodině.



Tlačítko pro nastavení času

1. Tlačítko svítí modře a výchozí čas masáže je nastaven na 10 minut.
2. Po stisknutí svítí tlačítko červeně a čas masáže se nastaví na 15 minut.
3. Po opětovném stisknutí svítí tlačítko červeně a modře a čas masáže se nastaví na 20 minut.

Tlačítko pro výběr programů

1. Jako výchozí je nastaven program I, po stisknutí přepnete na program II a po opětovném stisknutí přepnete na program III.
2. Program I je indikován modrým světlem, program II červeným světlem a program III červeným a modrým blikajícím světlem.
3. Program I a program II zahrnuje masáž pat a vzduchovou masáž a program III pouze vzduchovou masáž.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!