CZ **NÁVOD K OBSLUZE**

Alkoholtester AT 3605



Obj. č.: 143 23 33

Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup alkoholtesteru AT 3605.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Popis a ovládací prvky

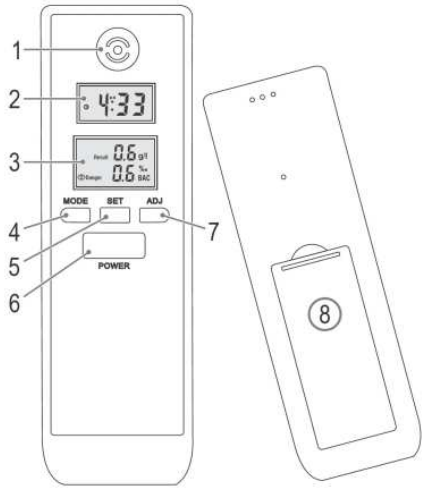

1 Senzor dechu
2 LCD hodinky
3 LCD alkoholtester
4 Tlačítko MODE (výběr různých funkcí)
5 Tlačítko SET (potvrzení zadání)
6 Tlačítko POWER (spuštění alkoholtesteru)
7 Tlačítko ADJ (tlačítko pro nastavení)
8 Přihrádka na baterie

Vložení baterií

(Baterie nejsou součástí dodávky.)

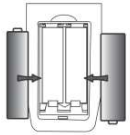


- Odstraňte víčko přihrádky na baterie na zadní straně přístroje.
- Vložte do alkoholtesteru 2 baterie typu.
- Dbejte na správnou polaritu! Příslušné pokyny najdete na výrobku.

Jakmile začne zobrazení na LCD displeji blikat nebo slábnout, vyměňte baterie za nové stejného typu. Vždy vyměňte obě baterie.

Obsluha

- Alkohol se ještě nějakou dobu drží v ústní dutině a nejprve v ní musí být odbourán.
- Po požití posledního alkoholického nápoje počkejte 20 minut, než provedete měření.
- 20 minut před měřením nejezte a nekuřte.
- Také necucejte bonbony na kašel nebo větrové bonbony – mohlo by dojít ke zkreslení měření.
- Test můžete zopakovat, abyste získali spolehlivý výsledek. Další měření ale provádějte až po 3 minutách!
- Nepoužívejte v blízkosti testeru žádné těkavé látky, jako např.: barvy, ředidla, prostředky na hubení hmyzu atd.

Zahřívání

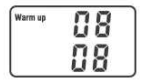

- Podržte stisknuté tlačítko POWER, dokud neuslyšíte signál.
- Zobrazí se symbol zahřívání WARM UP a začne odpočítávání od 10 do 0. Alkoholtester se nachází v režimu zahřívání.

Před prvním použitím nebo v případě, že jste tester delší dobu nepoužili: Přístroj potřebuje několik cyklů, aby se senzor vyčistil a zahřál. Opakovaně stiskněte tlačítko POWER a počkejte, až se dokončí zahřívání.

Testování

1. Pokud fáze zahřívání proběhla úspěšně, na displeji se objeví nápis BLOW (foukejte). Přístroj se nachází v režimu testování. Odpočítávání začne na 10.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!